

Fecha y hora creación del servicio

6/3/21 2:30 PM

Fecha y hora cierre de actividad

6/3/21 3:30 PM

Llamada

28563

Actividad

127327

Datos del cliente

Nombre: ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS S & C

Ciudad: MEDELLIN

Contacto: ALVARO SANABRIA

Dirección: CL 7 39 107 OF 13 08

Teléfono: 4944813

Email: marthapcastaneda@gmail.com

Información del equipo:

Cabezal de cámara monochip TELECAM
sistema de color NTSC, sumergible,
Dispositivo: esterilizable por gas, con obj

Referencia: 20212130

Fecha de compra: 27/8/2019

Serie: OQ006142-K

Accesorios

No tiene

Tipo de servicio: PREVENTIVO

Falla reportada u observación del cliente

Cabezal 20212130 Sn OQ006142-K - Preventivo por contrato

Observaciones generales

Se ejecuta rutina de mantenimiento. Equipo no muestra novedad o problema alguno. Este es apto para su servicio.

Nuestros diagnósticos son realizados bajo estrictos estándares de calidad. Sin embargo, puede ocurrir que en el momento de realizar la apertura del dispositivo para su reparación, se encuentren daños adicionales los cuales podrán incrementar el costo inicial de la reparación. Para tal efecto enviaremos una notificación con los hallazgos y el nuevo costo de reparación para su aprobación.

CABEZA DE CAMARA

1. CABEZA DE CAMARA

1.1. MARCA

MARCA	KARL STORZ (ALEMANIA)
-------	-----------------------

1.2. LISTA DE VERIFICACION

Comprobación Visual:	Bien
Chasis / carcasa:	Bien
Mecanismo de sujeción:	Bien
Tornillos mecanismo de sujeción:	Bien
Ventanilla externa del sistema óptico:	Bien
Anillo foco:	Bien
Anillo zoom:	Bien
Botones de manejo:	Bien
Cable de la cámara:	Bien
Conector y pistas:	Bien
Conexión a consola de video y reconocimiento:	Bien
Configuración menú y funciones:	Bien
Sensibilidad a las sacudidas:	Bien
Centrado de la imagen:	Bien
Reproducción de color y calidad de imagen:	Bien
Balance de blancos:	Bien
Funcionamiento del obturador:	Bien
Filtración Interna (Empañamiento):	Bien
Accesorios:	Bien
Limpieza general:	Bien

1.3. OBSERVACIONES ESPECIFICAS

Observaciones Especificas	Equipo apto para su servicio
---------------------------	------------------------------

1.4. ESTADO DEL DISPOSITIVO

Estado Del Dispositivo	En funcionamiento normal según especificaciones de fábrica.
------------------------	---

1.5. REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	Nin
--------------------------	-----

1.6. RECOMENDACIONES

CABEZA DE CAMARA

Recomendaciones por parte de Biotronitech:	<ul style="list-style-type: none">- No realizar bucles o acodamientos muy cerrados o pequeños al cable ya que puede causar fractura en los filamentos internos.- Mantener cabezal con tapa protectora para evitar rayones en la ventanilla externa del adaptador óptico.- No realizar movimientos de palanca o torsión al conectar o desconectar el cabezal de la consola ya que puede generar daños en sus conectores.- Asegurarse de retirar los residuos de agentes desinfectantes los cuales pueden reaccionar químicamente con el proceso de esterilización deteriorando partes en el cabezal.- Seguir atentamente las indicaciones del manual de usuario.
--	---

1.7. FIRMAS

Institución / Socio de Negocio	 Vanessa holguin gomez
Bioingeniería Biotronitech:	 Sebastián López Seguro
IMPORTANTE	ENTREGA: Ambas partes firman y consta que el equipo fue revisado según las condiciones descritas en este reporte.

LLamada

28563

Actividad

127327

Datos del cliente

Nombre: ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS S & C

Ciudad: MEDELLÍN

Contacto: ALVARO SANABRIA

Dirección: CL 7 39 107 OF 13 08

Teléfono: 4944813

Email: marthapcastaneda@gmail.com

 Dispositivo: Cabezal de cámara monochip
 TELECAM sistema de color NTSC,
 sumergible, esterilizable por gas, con
 obj

Referencia: 20212130

Fecha de compra: 26/08/2019

Serie: OQ006142-K

Anexos

IMAGEN



OBSERVACIONES

Cuerpo en buenas condiciones

IMAGEN



OBSERVACIONES

Botones y carcasas en buenas condiciones

IMAGEN



OBSERVACIONES

Ventana distal en buenas condiciones

IMAGEN



OBSERVACIONES

IMAGEN



OBSERVACIONES

Mordazas en buenas condiciones

IMAGEN



OBSERVACIONES

Serial de la camara

IMAGEN



OBSERVACIONES

Tubo antidobles en buenas condiciones

IMAGEN



OBSERVACIONES

Cable en buenas condiciones


IMAGEN



OBSERVACIONES

Conector de cámara en buenas condiciones 2

IMAGEN

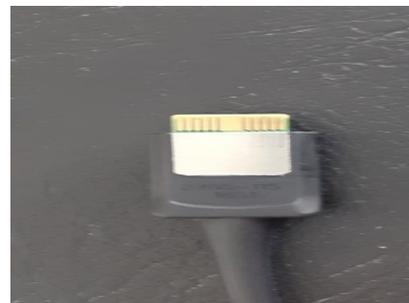

OBSERVACIONES

Conector en buen estado

IMAGEN



OBSERVACIONES

Pruebas de imagen con foco activo

IMAGEN



OBSERVACIONES

Pruebas de imagen con zoom activo

IMAGEN



OBSERVACIONES

Pruebas de centrado de imagen